

Toujeo® SoloStar®

insulin glargine 300 units/mL

Six simple steps for injecting

Step

1

Check your pen

Always check the name and expiry date on the label to ensure

- ✓ You have the correct insulin
- ✓ The expiry date has not passed

Pull off the pen cap and check that the insulin is clear

- ✗ Do not use the pen if the insulin looks cloudy, colored or contains particles




! Remember to remove your new pen from the fridge at least one hour before you inject

Step

2

Attach a new needle

- ✓ Always use a new needle. This helps stop blocked needles, contamination and infection
- ✓ Always use the needle that is compatible with the use

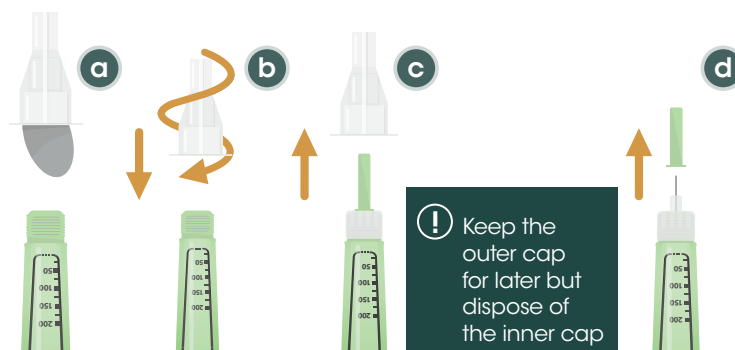


! Keep the outer cap for later but dispose of the inner cap

Step

3

Perform a safety test

- ✓ Always perform a safety test before each injection to ensure your pen and needle are working properly
- ✓ Select and dispense 3 units of insulin
- ✓ If no insulin comes out of the needle tip, you may need to repeat the safety test 3 times before seeing insulin
- ✓ If no insulin appears after the third test, change the needle and repeat the test. If there is still no insulin, use a new pen

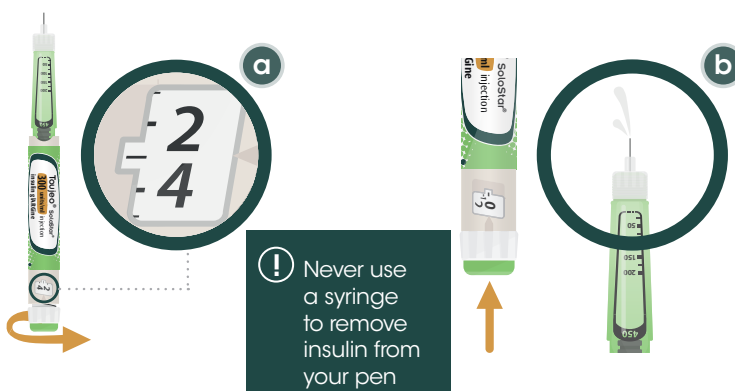

! Never use a syringe to remove insulin from your pen

Step

4

Select the dose

- ✓ Make sure the needle is attached and the dose is set to "0"
- ✓ Turn the dose selector until the dose pointer lines up with your intended dose
- ✓ If you turn past your dose, you can turn back down
- ✓ If you cannot select your full prescribed dose, split the dose into 2 injections or use a new pen
- ✗ Never select a dose or press the injection button without a needle attached. This may damage your pen.



! A maximum of 80 units can be delivered per injection

Toujeo® SoloStar®

insulin glargine 300 units/mL


Six simple steps for injecting

Step

5

Inject your dose

- ✓ Inject Toujeo® SoloStar® into your stomach, upper arms or thighs subcutaneously
- ✓ Push the needle into your skin, as shown by your doctor, pharmacist or nurse
- ✓ Place your thumb on the injection button and then press all the way in and hold
- ✓ Keep the injection button held in and when you see "0" in the dose window, slowly count from 1 to 5 before releasing the button and removing the needle from your skin. This will make sure you get your full dose
- ✗ If you find it hard to press the injection button in, do not force it as this may break your pen

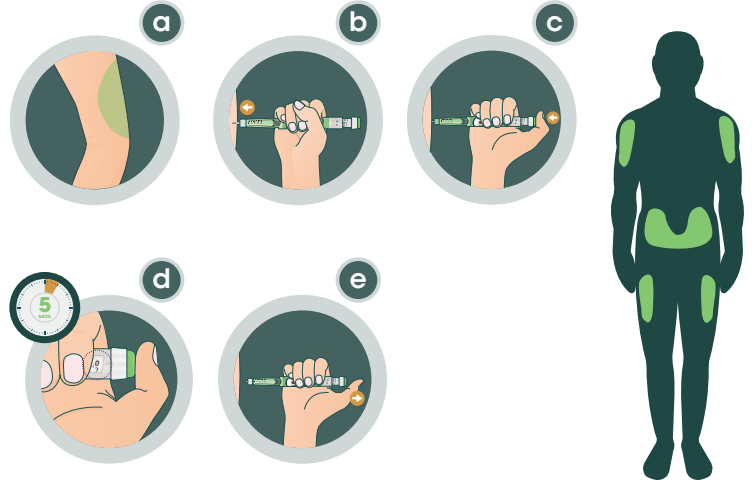


Step

6

Remove and dispose of the needle

- ✓ Take care when handling needles, this is to prevent injury and infection
- ✓ Throw away the used needle in a puncture resistant container
- ✗ Never put the inner needle cap back on

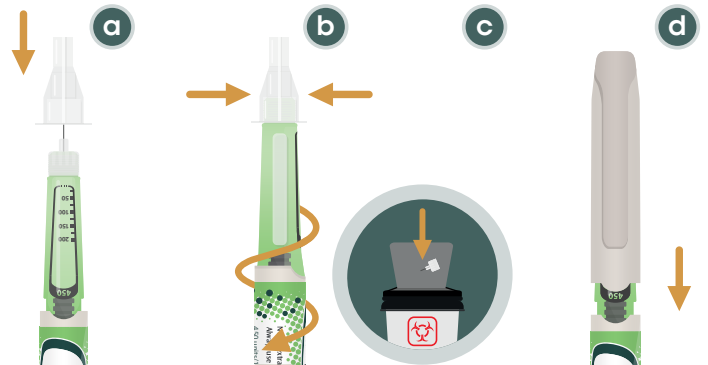

Remember

- ✓ When using your pen for the first time, remove it from the fridge at least an hour before first use. Avoid injecting insulin straight out of the fridge. This will feel more comfortable
- ✓ After first use keep your pen at room temperature below 30°C and never put your pen back in the fridge
- ✓ Always carry a spare pen and spare needles in case they get lost or damaged
- ✓ Always use a new needle each time you use the pen
- ✓ Only use your pen for up to 6 weeks after its first use
- ✗ Never share your pen with anyone else, it is meant for you alone
- ✗ Never attempt to remove the insulin with a syringe from your pen

SANOFI, Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box 9874, Jeddah 21423, K.SA Tel: +966-12-669-33181 Fax: +966-12-663-6191
For Medical Information, Please contact: +966-12-669-3318, ksa_medicalinformation@sanofi.com,
For Pharmacovigilance, Please contact: +966-544-284-797, ksa_pharmacovigilance@sanofi.com
To report any Product Technical Complaint, please contact SANOFI Quality Department: Email: KSA_PTC_Reporting@sanofi.com
www.sanofi.com.sa



توجيه® سولوستار®

أنسولين جلارجين ٣٠٠ وحدة/ملي لتر

٦ خطوات بسيطة للحقن

الخطوة الأولى

تحقق من قلم الخاص بك

تحقق دائماً من الاسم وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق؛ للتأكد من:

- ✓ أن لديك الأنسولين الصحيح.
- ✓ أنه لم يتم تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.

اسحب غطاء القلم وتحقق من أن الأنسولين صاف

✗ لا تستخدم القلم إذا كان الأنسولين يبدو غائماً، ملوناً أو يحتوي على جسيمات.



تذكر أخراج القلم الحديد الخاص بك من التلافة قبل ساعة واحدة على الأقل من الحقن


الخطوة الثانية

قم بإرفاق إبرة جديدة

✓ استخدم دائماً إبرة جديدة. يُساعد هذا على توفير انسداد الإبر، وتلوئها وانتقال العدوى بها

✓ استخدم دائماً الإبرة المتوافقة مع القلم

حافظ على الغطاء الخارجي لوقت لاحق ولكن تخلص من الغطاء للأدخلي

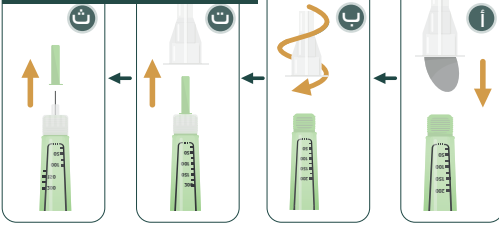

الخطوة الثالثة

قم بإجراء اختبار الأمان

✓ قم دائماً بإجراء اختبار الأمان قبل كل حقن؛ للتأكد من أن القلم والإبرة الخاصين بك يعملان بشكل صحيح.

✓ حدد ٣ وحدات من الأنسولين وقم بتوزيعها.

✓ إذا لم يضر أي أنسولين من طرف الإبرة، قد تكون بحاجة إلى إعادة إجراء اختبار الأمان ٣ مرات قبل رؤية الأنسولين.

✓ إذا لم يظهر أي أنسولين بعد الاختبار الثالث، قم بتغيير الإبرة وأعد الاختبار. إذا كان لا يزال هناك عدم ظهور للأنسولين، فاستخدم قلماً جديداً

الخطوة الرابعة

حدد الجرعة

✓ تأكد من أنه تم إرفاق الإبرة وضبط الجرعة على "

✓ قم بلف محدد الجرعة حتى يصل مؤشر الجرعة إلى الجرعة المقصودة الخاصة بك.

✓ إذا قمت بلف محدد الجرعة متجاوزاً الجرعة التي تريد حقنها، فبإمكانك لفة مرة ثانية.

✓ إذا لم تتمكن من تحديد الجرعة الموصوفة لك بالكامل، قم بتقسيم الجرعة على حقنتين أو استخدم قلماً جديداً.

✗ لا تختر جرعة أو تضغط على كبسة الحقن دون وضع إبرة أولاً. قد يلحق هذا الضرر بالقلم الخاص بك.

لا تستخدم سرنجة على الإطلاق لإزالة الأنسولين من القلم الخاص بك.



من الممكن إعطاء ٨٠ وحدة بحد أقصى في الحقنة الواحدة





حقن الجرعة الخاصّة بك

- ✓ اصقن عقار توجيو سولوستار في بطنك، أو أعلى الذراعين أو الفخذين تحت الجلد.
- ✓ أدخل الإبرة إلى الجلد لديك، على النحو الموضح من قبل طبيبك أو الصيدلي أو الممرض(ة) الخاص(ة) بك.
- ✓ ضع إبهامك على زر الحقن ثم اضغط بشكل كامل وتوقف.
- ✓ استمر في الضغط على زر الحقن وعندما ترى "0"، في نافذة الجرعة، عد من 1 إلى 0 بيضاء قبل إطلاق الرز وإزالة الإبرة من جلدك، سيؤكد هذا حصولك على الجرعة بالكامل.
- ✗ إذا وجدت أنه يضغط الضغط على زر الحقن للداخل، فلا تضغط عليه بقوة؛ لأنّ ذلك قد يعمل على خسر القلم الخاص بك.

قم بإزالة الإبرة والتخلص منها

- ✓ توخ الحذر عند التعامل مع الإبر، هذا الإجراء للوقاية من حدوث الإصابة وانتقال العدوى.
- ✓ تخلص من الإبرة المستخدمة عن طريق وضعها في وعاء مقاوم للثقب.
- ✗ لا تضع أبداً غطاء الإبرة الداخلي مرة أخرى.

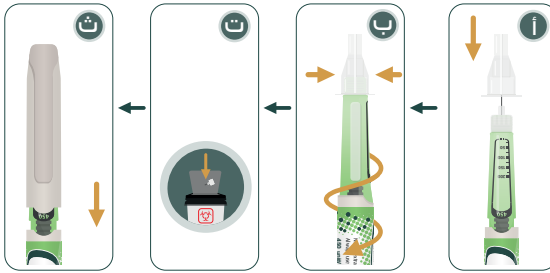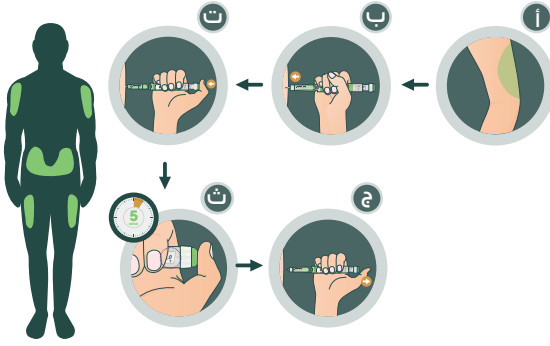

تذكّر أن

- ✓ عند استخدام القلم الخاص بك للمرة الأولى، قم بإخراجه من التلاجة قبل ساعة واحدة على الأقل من الاستخدام لأول مرة. تجنب حقن الأنسولين بعد خروجه من التلاجة مباشرة، سيجعلك هذا تشعر بأكثر ارتياحاً.
- ✓ بعد الاستخدام لأول مرة، احفظ القلم الخاص بك في درجة حرارة الغرفة أقل من 1- درجة مئوية ولا تضعه أبداً في التلاجة مرة أخرى.
- ✓ احصل دائماً قلماً إضافياً وإبراً إضافية في حالة فقدانهم أو تلفهم.
- ✓ قم دائماً باستخدام إبرة جديدة في كل مرة تستخدم فيها القلم.
- ✓ استخدم قلمك فقط لمدة ستة أسابيع من أول استخدام.
- ✗ لا تشارك أبداً القلم الخاص بك مع أي شخص آخر، فهو معد لك وحدك.
- ✗ لا تحاول مطلقاً إخراج الأنسولين من القلم الخاص بالسربرة.