

# Instrukcja użycia produktu we wstrzykiwaczu

## 1. Przygotowanie do wykonania wstrzyknięcia

### Potrzebne będą:

- wstrzykiwacz leku ,
- gaziki nasączone alkoholem,
- wacik lub gaza,
- pojemnik odporny na przekłucie.

### CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

- Nie używać wstrzykiwacza, jeśli brakuje niebieskiej nasadki lub nasadka ta nie jest dokładnie przymocowana.
- Nie używać wstrzykiwacza wielokrotnie.
- Nie wstrząsać wstrzykiwaczem.
- Nie dotykać żółtej osłonki zabezpieczającej.
- Nie używać wstrzykiwacza, jeśli został upuszczony lub uszkodzony.
- Nie zamrażać wstrzykiwacza.
- Nie wystawiać wstrzykiwacza na bezpośrednie działanie światła słonecznego.


### Przygotowanie do wykonania wstrzyknięcia:

- Odłożyć wstrzykiwacz na 30 do 40 minut, aby ogrzał się do temperatury pokojowej:
- Nie podgrzewać wstrzykiwacza, należy odłożyć go do czasu, aż sam się ogrzeje.
- Nie wkładać wstrzykiwacza z powrotem do lodówki.

- Sprawdzić, czy wstrzykiwacz zawiera odpowiedni lek we właściwej dawce.
- Sprawdzić termin ważności: nie stosować tego leku po upływie terminu ważności.
- Należy upewnić się, że roztwór jest przejrzysty, w kolorze od bezbarwnego do białozółtego i nie zawiera cząstek stałych – w innym wypadku nie należy stosować leku.
- Może być widoczny pęcherzyk powietrza. Jest to normalne.
- Nie stosować leku, jeśli okienko jest całkowicie żółte.
- Nie stosować tego leku, jeśli zmieni kolor lub zmętnieje lub jeśli będzie zawierał widoczne zanieczyszczenia lub cząstki stałe.
- Umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha ręcznikiem.
- Skórę przetrzeć w miejscu planowanego wstrzyknięcia gazikiem nasączonym alkoholem.
- W trakcie samodzielnego wykonywania wstrzyknięcia można stać lub siedzieć.
- Nie należy wykonywać wstrzyknięcia w miejscu, w którym skóra jest bolesna, stwardniała, zaczerwieniona lub nadmiernie ocieplona.
- Nie należy wykonywać wstrzyknięcia w pobliżu widocznej żyły, blizn ani rozstępów.
- Nie wstrzykiwać leku w to samo miejsce z innymi lekami podawanymi we wstrzyknięciach.

### Wstrzyknięcie można wykonać:


- w udo,
- w brzuch (z wyjątkiem obszaru o średnicy 5 cm wokół pępka),
- w zewnętrzną powierzchnię ramienia.
- Za każdym razem wstrzyknięcie należy wykonywać w inne miejsce. Jeśli konieczne jest wykonanie wstrzyknięcia w to samo miejsce, należy upewnić się, że nie jest to ten sam punkt, w który wykonano poprzednie wstrzyknięcie.

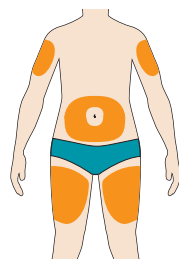

## 2. Zdjąć niebieską nasadkę

Jeśli pacjent jest gotowy do wykonania wstrzyknięcia, należy zdjąć niebieską nasadkę.


- trzymać wstrzykiwacz leku w sposób przedstawiony jak obok.
- Nie nakładać z powrotem niebieskiej nasadki.
- Nie dotykać żółtej osłonki zabezpieczającej.
- Okienko musi pozostać cały czas widoczne.

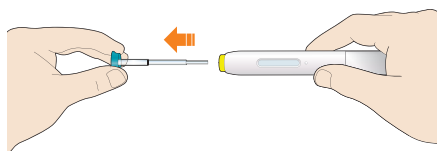

## Instrukcja użycia produktu we wstrzykiwaczu c.d.

### 3. Przycisnąć żółtą osłonkę zabezpieczającą do skóry pod kątem około 90 stopni

Przycisnąć wstrzykiwacz i mocno przytrzymać przy ciele, tak aby żółta osłonka zabezpieczająca nie była widoczna, pod kątem około 90°. W razie potrzeby chwycić między palcami fałd skórny, tak aby skóra w miejscu wstrzyknięcia się nie przesuwiała. Wstrzykiwacz nie zadziała, jeśli żółta osłonka zabezpieczająca nie będzie w pełni wciśnięta.

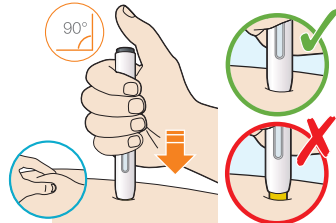

### 4. Wcisnąć i zwolnić zielony (wstrzykiwacz 75 mg) lub szary (wstrzykiwacz 150 mg) przycisk


Kciukiem wcisnąć i natychmiast zwolnić zielony (wstrzykiwacz 75 mg) lub szary (wstrzykiwacz 150 mg) przycisk.

Będzie słycać kliknięcie. Oznacza to, że w tym momencie rozpoczęło się wstrzykiwanie leku. Kolor okienka zacznie się zmieniać na żółty.



### 5. Przytrzymać wstrzykiwacz do momentu, aż okienko zmieni kolor na żółty

- Po zwolnieniu przycisku przytrzymać wstrzykiwacz przyciśnięty do skóry. **Przytrzymać do 20 sekund.**
- Przed usunięciem wstrzykiwacza należy upewnić się, że okienko zmieniło kolor na żółty.
- Wstrzyknięcie będzie zakończone, gdy całe okienko zmieni kolor na żółty. Można wtedy usłyszeć drugie kliknięcie.
- **Nie pocierać skóry po wykonaniu wstrzyknięcia.**

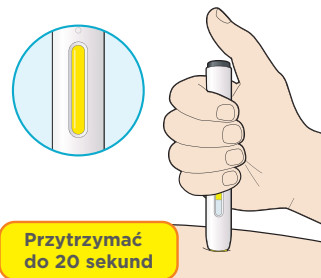

### 6. Usuwanie wstrzykiwacza

- **Bezpośrednio po użyciu usunąć wstrzykiwacz** i nasadkę do pojemnika odpornego na prze-kłucie.
- **Nie nakładać ponownie niebieskiej nasadki.**
- Należy zapytać lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jak usunąć pojemnik.

Pełne informacje na temat dawkowania i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w ulotce dla pacjenta dołączonej do wstrzykiwacza.